



Domus 3

Superficie Especial de Manejo de Presión



Domus 3




Superficie Especial de Manejo de Presión

El Domus 3 es la SEMP Apex recomendada tanto para pacientes con riesgo alto de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado III.

Prevención UPPs





Tratamiento UPPs

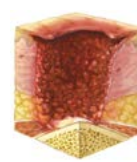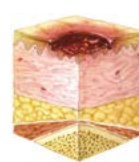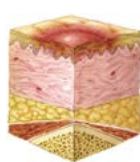

El Domus 3 es un colchón de reemplazo con terapia de presión alternante (las celdas individuales se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos) y función estática (que facilita el reposicionamiento y las transferencias del paciente).

TERAPIA DE PRESIÓN ALTERNANTE

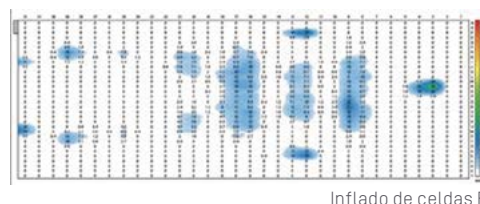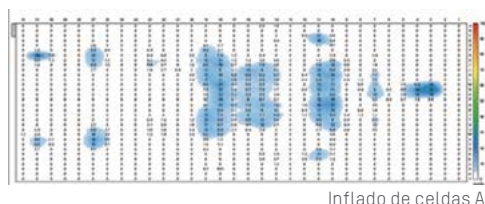

Paciente: Hombre / 80 kilos / 170 cm

El compresor dispone de un regulador en función del peso del paciente (de 40 a 180 kilos). Además, es ergonómico, de fácil uso y limpieza. Dispone de una alarma visual de baja presión que aumenta la seguridad del paciente.




Colchón de reemplazo: No requiere de un colchón extra en la base.



Funda antimicrobiana Ag+: Permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y con tratamiento antibacteriano MRSA.



Cremallera con solapa: Evita la entrada de líquidos.

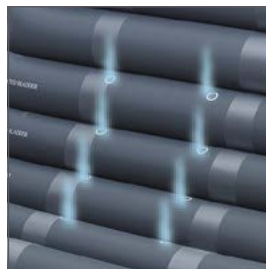

Celdas ventiladas en la zona del sacro: Regula el calor y la humedad. Reduce la maceración de la piel.



Muelles de seguridad internos y funda protectora: Permite un flujo de aire continuo y evita roturas del tubo externo.



CPR: Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardio-respiratoria.

Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Alto. Gracias a sus 17 celdas alternantes de 12,7 cm de altura.



Gestión del Microclima: Alta. Su funda Nylon PU acolchada es resistente al agua y permeable al vapor. Las celdas están ventiladas en la zona del sacro para reducir la maceración de la piel.



Reducción de la Fricción: Media. Incluye una funda Nylon PU que ha superado tests de irritación y sensibilidad a la piel.



Seguridad del paciente: Básica. Incorpora alarma visible de baja presión y CPR. La funda con tratamiento de ión plata, ha superado el test de citotoxicidad. Muelles internos para garantizar el flujo de aire y funda protectora para evitar roturas del tubo externo.



Peso máximo soportado: 180 kg.

Descripción de producto	Referencia
Domus 3	0102010-85
Descripción de accesorios	
Tapón para tubería	0104033
Tapón para celda	0104034

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	48 x 34,5 x 49 cm
Peso total de la caja	9,5 kg

Especificaciones del colchón	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	200 x 85 x 12,7 + 5 cm de foam
Peso	5,6 kg
Celdas	17 celdas independientes de Nylon PU de 12,7 cm
Zona estática en la cabeza	3 celdas
Celdas ventiladas	9 celdas
Base	Nylon PVC
CPR	Sí
Guía para cable	Sí
Cinchas de ajuste al somier	Sí
Muelles de seguridad internos	Sí
Funda protectora del tubo externo	Sí
Certificados	Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2
Garantía	2 años

Especificaciones del compresor	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	29 x 18,5 x 12,6 cm
Peso	2,2 kg
Voltaje	AC 220-240V, 50 Hz
Máxima salida de aire	8 litros/minuto
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-180 kg)
Duración del ciclo alternante	9,6 minutos
Terapias	Alternante
Funciones	Estática
Alarma	Visual de baja presión
Nivel sonoro	30 dBA
Botón encendido y apagado	Sí
Modo transporte	Sí
Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21
Garantía	2 años

Especificaciones de la funda	
Material	Nylon PU acolchada con tratamiento antibacteriano de Ión Plata (Ag+)
Cierre	Cremallera con solapa
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Control de infecciones	Anti moho y hongos
Bio-compatibilidad	Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel
Protocolo de limpieza	
Certificaciones	REACH&RoHS



APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com